




lakši pristup tanku za punjenje



jednostavno otvaranje i zatvaranje

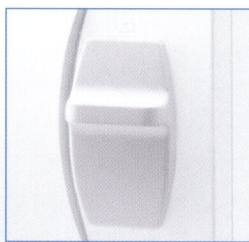

novi brzi priključci za odvod vode (ispuštanje vode)

## Upravljanje sistemom

Svi autoklavi Pro-Class i S-Class modela sarađuju sa specijalnim upravljačkim sistemom za svaku određenu kontrolu sterilizacije. Tokom sterilizacionog procesa dodat je elektronski sistem sačinjen od mikroprocesora za analizu svih parametara kroz visoku preciznost senzora za pritisak i temperaturu. Stoga, greške nema.


## Klasa S Autoklava Euroklav®+

U praksi gde se koriste manje komplikovani instrumenti, a zahtevi za način pakovanja su srednjeg nivoa, MELAG nudi S klasu autoklava iz Euroklav®+ serije.


Euroklav® 23 VS+ i 29 VS+ modeli rade u kombinaciji sa jednostavnim pred-vakuumom i pulsirajućim nad pritiskom u cilju efikasnog izbacivanja vazduha. To je naročito važno kod zapakovanih instrumenata i tekstila. Ovim procesom se može sterilisati većina instrumenata jedne medicinsko / stomatološke ordinacije. Za slabije cikluse sterilizacije ili sterilizaciju bez vakumskog sušenja, nudimo Euroklav® 23 S+ i klasu S model.

## Tabela sa tehničkim podacima za Vacuklave®+ i Euroklave®

Primeri programa od Vacuklava® 30 B+

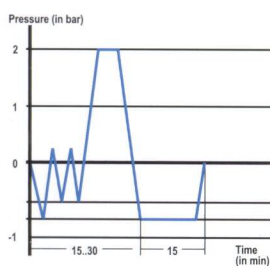


Univerzalni program

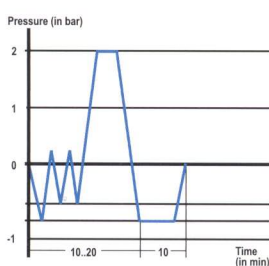


Brzi program „B“

Primeri programa od Euroklava® 29 VS+

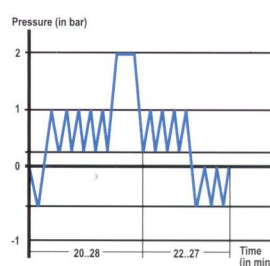

Univerzalni program

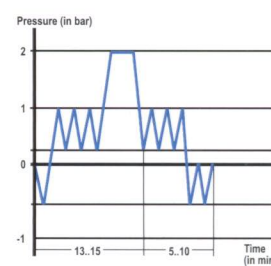

Brzi program

**Programi:** Pro Klasa Vacuklav®+ Univerzalni program Brzi program S Brzi program B Nežni program Prion program Vakum test / Bowie&Dick test  
S Klasa Euroklav®+ Univerzalni program Brzi program Nežni program Prion program Vakum test\* / Bowie&Dick test \* ne u Euroklavu 23 S+

Tehnički podaci	Vacuklav®30 B+ Veza sa srevom za vodu	Vacuklav®31 B+ „stoji sam“	Vacuklav®23 B+ „stoji sam“	Vacuklav®24 B+ Veza sa srevom za vodu	Euroklav®23 VS+	Euroklav®29 VS+	Euroklav®23 S+
Veličina udubljenja	35 cm x 25 cm	35 cm x 25 cm	45 cm x 25 cm	45 cm x 25 cm	45 cm x 25 cm	35 cm x 25 cm	45 cm x 25 cm
Masa udubljenja	18 l	18 l	22 l	22 l	22 l	18 l	22 l
Tovarni kvantitet	5 kg instrumenata 2 kg tekstila	5 kg instrumenata 1,8 kg tekstila	5 kg instrumenata 1,8 kg tekstila	7 kg instrumenata 2,5 kg tekstila	4 kg instrumenata 1 kg tekstila	3 kg instrumenata 0,8 kg tekstila	4 kg instrumenata 0,6 kg tekstila
Dimenzije	42,5 cm x 48,5 cm x 57 cm Feet of the unit fit on 50 cm tabletop	42,5 cm x 48,5 cm x 57 cm Feet of the unit fit on 50 cm tabletop	42,5 cm x 48,5 cm x 72 cm Feet of the unit fit on 60 cm tabletop	42,5 cm x 48,5 cm x 66 cm Feet of the unit fit on 60 cm tabletop	42,5 cm x 48,5 cm x 66 cm Feet of the unit fit on 60 cm tabletop	42,5 cm x 48,5 cm x 57 cm Feet of the unit fit on 50 cm tabletop	42,5 cm x 48,5 cm x 66 cm Feet of the unit fit on 60 cm tabletop
Težina	44 kg	44 kg	49 kg	48 kg	43 kg	43 kg	43 kg
Snaga napajanja	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Snaga potrošnje	2500 W	2500 W	2500 W	2500 W	3000 W	2500 W	3000 W

Mi proizvodimo autoklave prema vašim najstrožim ispitivanjima kvaliteta kao i prema internacionalnim normama.